

Dispositivo di aspirazione sottovuoto ECG

ergo vac

Il nuovo dispositivo di aspirazione
sottovuoto ECG



10
polig

Aggancio per le
linee di aspirazione


Braccio telescopico
regolabile in altezza

Passacavo interno

Campo di rotazione a 300°

Carrello delle apparecchiature
(opzionale). Sono disponibili
diversi supporti per effettuare il
montaggio su carrello, tavolo o
parete.

Modulo pompa:
compatta, silenziosa, elevata
forza aspirante

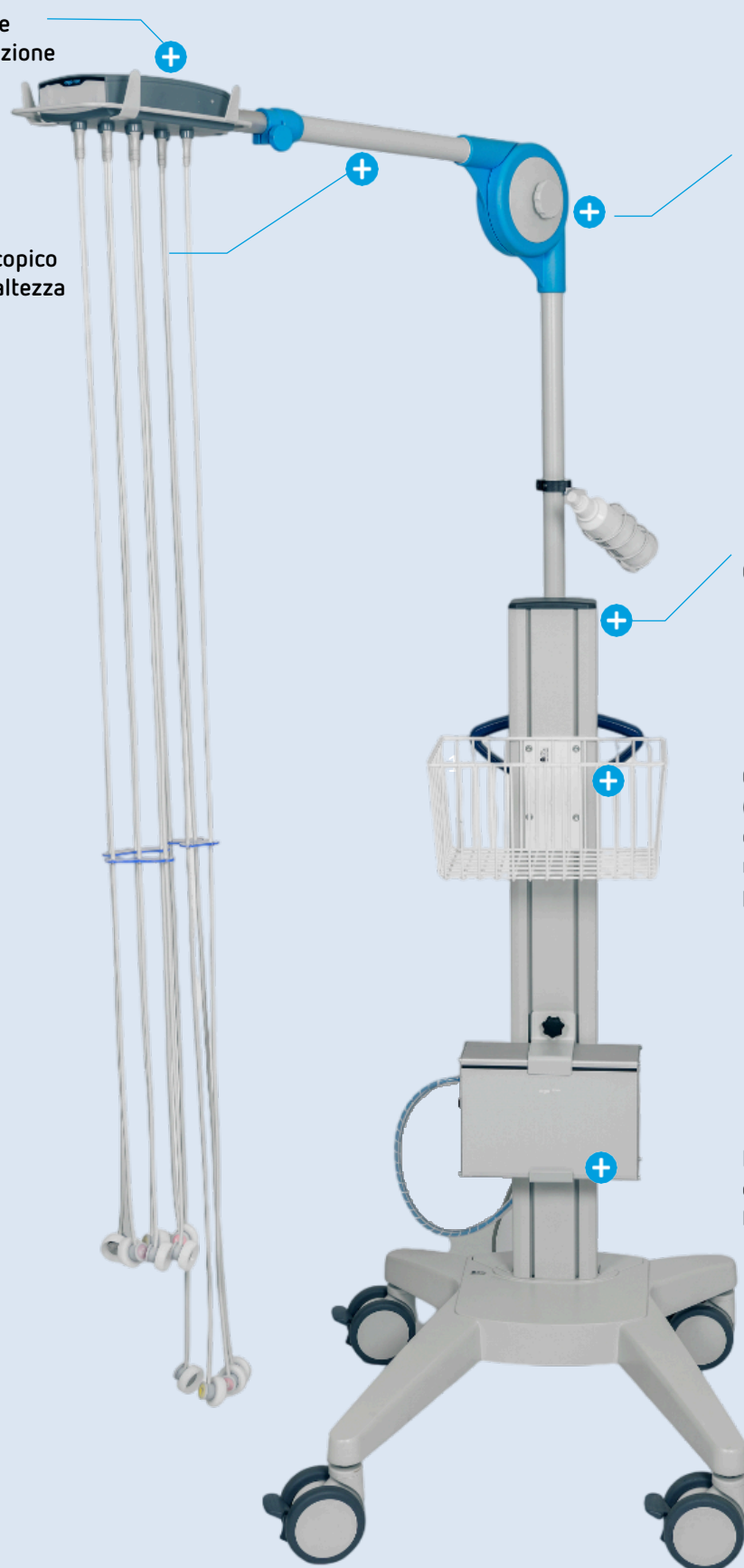

ergo vac

Rapido. Comodo. Semplice.

Il dispositivo di aspirazione a elettrodi *ergo vac* consente di effettuare in modo rapido e comodo la registrazione dell'elettrocardiogramma a riposo oppure sotto sforzo. L'*ergo vac* è adatto per tutti i tipi di apparecchi per elettrocardiogramma e può essere montato su diversi sistemi di carrelli. All'occorrenza offriamo anche dei supporti su misura. *ergo vac* dispone anche di una funzione di soffiatura, con la quale espellere le impurità e l'umidità.

ergo vac convince per via delle sue impareggiabili caratteristiche



Rapido. Comodo. Semplice.

Attualmente l'*ergo vac* è il dispositivo di aspirazione più silenzioso e innovativo sul mercato e dispone della funzione igienica di soffiatura. Può essere alimentato a batteria o attaccato alla corrente (opzione).



Notevole facilità d'uso

L'apparecchio viene azionato con appena quattro tasti. I LED indicano lo stato. La potenza della pressione negativa può essere variata in cinquestadi da 100 a 250 mbar.



Eccellente qualità del segnale

ergo vac fornisce segnali di perfetta qualità per 10 linee.



Semplicemente igienico

ergo vac dispone di una funzione disoffiatura che serve a eliminare le impurità e l'umidità.



Passaggio cavi interno

Protetto all'interno: per una maggiore igiene, una minore manutenzione e la massima sicurezza operativa. Linee degli elettrodi



Le linee conduttrici sono dotate di elettrodi ad argento/argento cloruro con ventose in silicone morbido.



Braccio del cavo *ergo vac^T*

La testiera è regolabile in modo flessibile.



Manuale completo

Il dispositivo di aspirazione *ergo vac* viene fornito con un manuale completo contenente istruzioni d'uso, informazioni di sicurezza e suggerimenti pratici.

Dati tecnici

Modulo pompa

Misure	170 x 170 x 55 mm
Peso	1,2 kg / 4 kg (con / senza batteria)
Alimentazione elettrica	100 – 240 VAC
Consumo di corrente	30 VA
Batteria (opzionale)	Batterie al gel di piombocina. 800 cicli di ricarica ca. 3,5 ore
Durata funzionale	ca. 3,5 ore
Durata di ricarica al 100 %	
Durata di ricarica durante l'esercizio	
Condizioni ambientali	
Temperatura di esercizio	10 – 50 °C, stoccaggio 10 – 40 °C
Umidità relativa dell'aria	30 – 75 % (non condensante)
Pressione dell'aria durante l'esercizio	700 – 1.060 hPa
Depressione	0 – 500 mbar
Corrente d'aria	0 – 5,5 l/min

Modulo pazienti

5 livelli di depressione	100 – 250 mbar
--------------------------	----------------

Cavo di sistema

Cavo di sistema	1,9 m
Attacco ECG	a 15 poli, conformemente alla norma standard IEC
Cavo di comando	1,5 m
Tubo	1,5 m

Elettrodi


Materiale	Ag/AgCl, coppetta di aspirazione sottovuoto in silicone
-----------	---

Braccio portacavo

Lunghezza	730 – 1060 mm
Altezza	620 mm
Campo di rotazione	300°

Standard di sicurezza

Standard di sicurezza	IEC/EN 60601-1
CEM	IEC/EN 60601-1-2
Classe di protezione	Apparecchio di classe I conforme alla norma IEC/EN 60601-1
Conformità/Classificazione	CE/I secondo il regolamento 2017/745/UE
Protezione	Questo apparecchio non è progettato per l'uso all'aperto (IPX0)

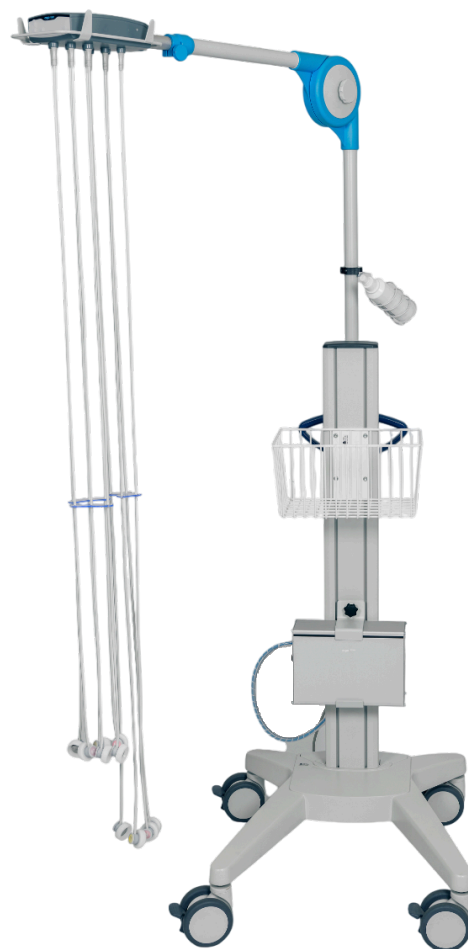

mbnet
engineering

mbnet Engineering GmbH
Kirschauer Str. 37a
02681 Callenberg
Germania
Tel. +49 35 92 34 83 0
verkauf@mbnet.de
www.mbnet.de