


Système d'aspiration pour ECG

ergo vac

Le nouveau système d'aspiration pour ECG



10
pôles

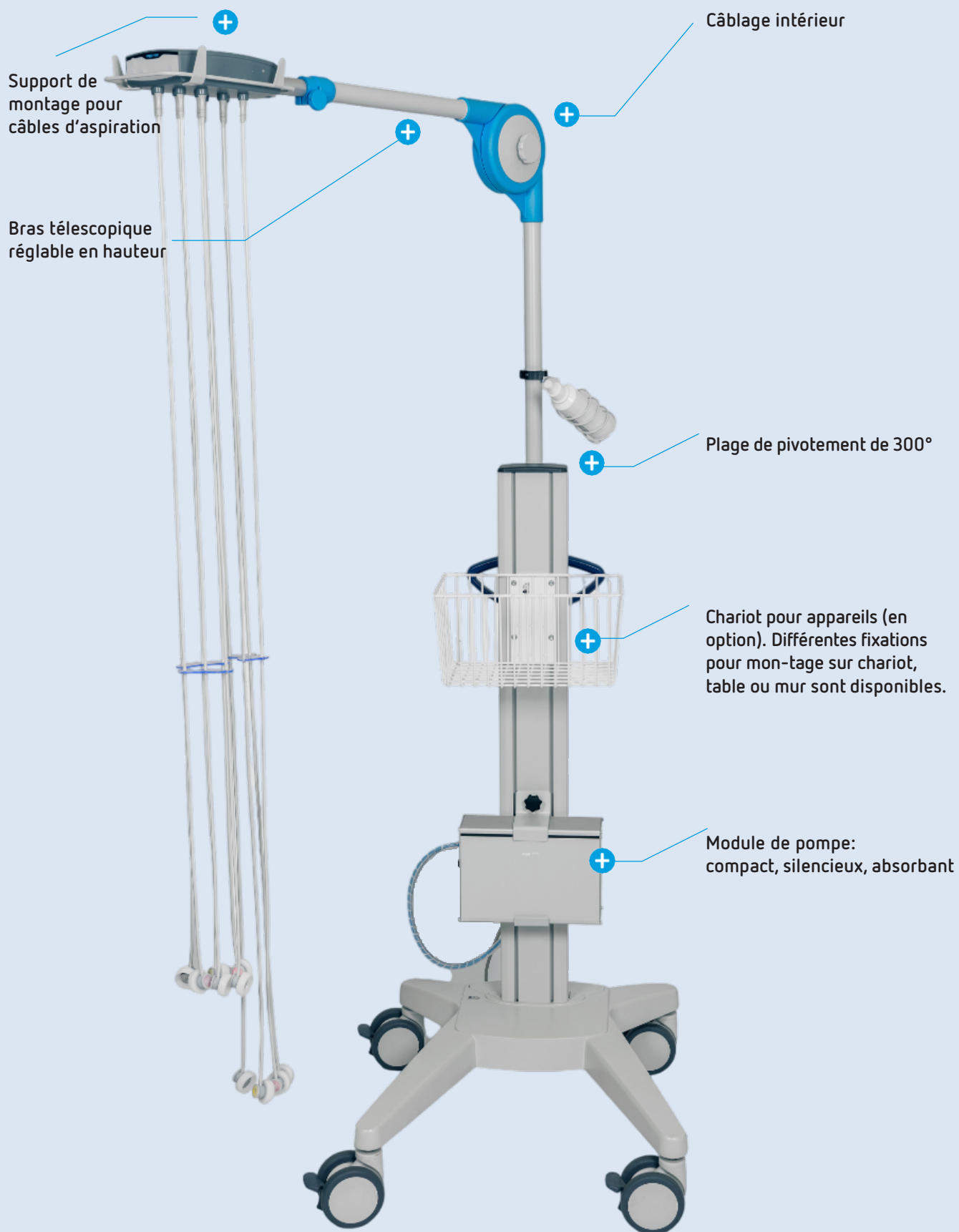

ergo vac

Rapide. Confortable. Simple.

Avec le système d'aspiration à électrodes *ergo vac*, vous exécutez rapidement et confortablement des mesures ECG au repos et à l'effort. L'*ergo vac* convient pour tous les types d'appareils à ECG et peut être monté sur divers systèmes de chariot. Si nécessaire nous proposons également des supports spécifiques aux besoins du client. *ergo vac* dispose également d'une fonction de soufflage pour souffler l'humidité et les impuretés.



Bras câble *ergo vac*^{LT}

ergo vac convainc par ses caractéristiques remarquables



Rapide. Confortable. Simple.

ergo vac est le système d'aspiration le plus silencieux et le plus innovant qui existe actuellement, avec fonction de soufflage hygiénique. Peut fonctionner sur réseau ou en mode batterie (en option).



Fonctionnement très simple

L'appareil est commandé avec quatre touches seulement. Des LED indiquent l'état. La performance sous vide peut être réglée entre 100 et 250 mbars en cinq paliers.



Excellente qualité de signal

ergo vac fournit une très bonne qualité de signal pour 10 évacuations.



Simplement hygiénique

ergo vac dispose d'une fonction de soufflage pour évacuer l'humidité et les impuretés.



Passage des câbles à l'intérieur

Protégé à l'intérieur – pour plus d'hygiène, moins d'entretien et une sécurité de fonctionnement maximale.



Conduites à électrodes

Les jeux de conduites disposent d'électrodes argent-chlorure d'argent avec des ventouses souples en silicone.



Bras pour câbles *ergo vac*^{LT}

La partie supérieure est mobile.



Manuel complet

Le système d'aspiration *ergo vac* est livré avec un manuel complet, contenant un mode d'emploi, des consignes de sécurité et des conseils pratiques.

Données techniques

Module de pompe

Dimensions	245 × 175 × 82 mm
Poids	2,4 kg / 3,5 kg (sans / avec accumulateur)
Alimentation Puissance	100 – 240 VAC 30 VA
Batterie (en option) Durée de vie Durée de charge à 100% Charge durant utilisation	Batterie en plombe env. 800 cycles de charge env. 3,5 heures env. 3,5 heures
Critère d'environnement Température ambiante Humidité relative de l'air Pression de l'air	10 – 50 °C, stockage à 10 – 40 °C 30 – 75% (non condensante) 700 – 1060 hPa
Aspiration	0 – 500 mbars
Débit d'air	0 – 5,5 l/min

Module patient

5 niveaux d'aspiration	100 – 250 mbars
------------------------	-----------------

Câble

Câble de système	1,9 m
Raccordement ECG	15 voies en accord avec le standard IEC
Câble de commande	1,5 m
Conduite	1,5 m


Électrodes

Matériel	Ag/AgCl, dôme d'aspiration en silicone
----------	--

Herse	<i>ergo vac</i>	<i>ergo vac^{LT}</i>
Longueur	730 – 1060 mm	505 – 945 mm
Hauteur	620 mm	835 mm
Rotation	300°	270°

Normes de sécurité

Sécurité standard	IEC/EN 60601-1
CEM	IEC/EN 60601-1-2
Classe de Protection	Class I en accord avec IEC/EN 60601-1
Conformité/Classification	CE/I conformément au règlement 2017/745/UE
Protection	Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur (IPX0)

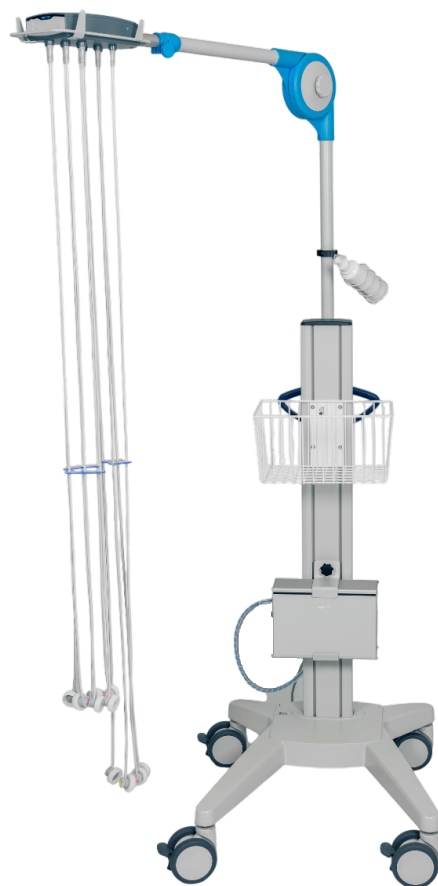

mbnet
engineering

mbnet Engineering GmbH
Kirschauer Str. 37a
OT Callenberg
02681 Schirgiswalde-Kirschau
Allemagne
Tél. +49 35 92 34 83 0
verkauf@mbnet.de
www.mbnet.de